

ALGIMED TECHNO

Средство для деконтаминации «CleanCheck Remover»


algimed-techno.com

«CleanCheck Remover» – это высокоэффективное и быстродействующее средство для деконтаминации рабочих поверхностей, оборудования и инструментов. Может применяться как при уже случившейся контаминации, так и для ее предотвращения.


Средство для деконтаминации применяется для удаления следовых количеств геномной ДНК, плазмидной ДНК, ПЦР-продуктов (ампликонов), а также любой другой ДНК, а также РНК.

Преимущества


- Эффективно разрушает фрагменты ДНК/РНК независимо от размера;
- Не содержит токсичных веществ и агрессивных химических реагентов;
- Не вызывает коррозии корпуса и внутренних частей оборудования;
- Обеспечивает эффективную деконтаминацию за 15 минут;
- Может использоваться на различных рабочих поверхностях, оборудовании и инструментах;
- Не оставляет следов на поверхностях;
- Не имеет запаха;
- Обработывает поверхности, не ингибируя ПЦР.

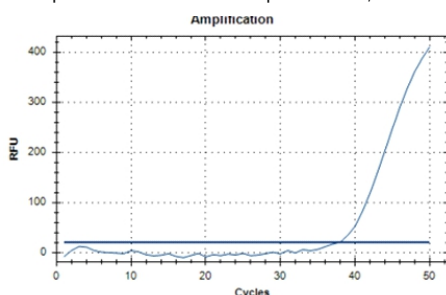


Результаты амплификации до обработки средством для деконтаминации «CleanCheck Remover» (следовые количества геномной ДНК)

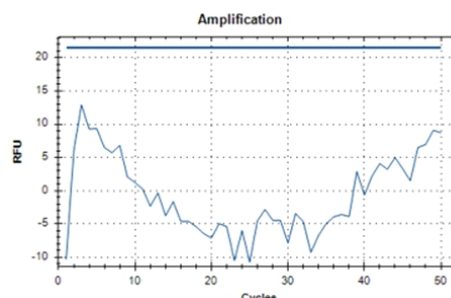


Результаты амплификации после обработки средством для деконтаминации «CleanCheck Remover» (следовые количества геномной ДНК)

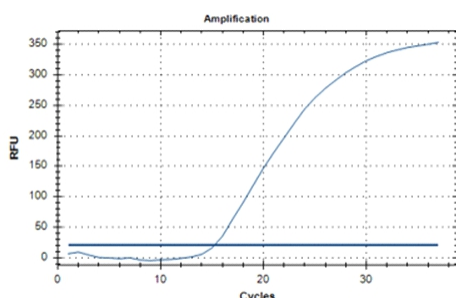


Результаты амплификации до обработки средством для деконтаминации «CleanCheck Remover» (ампликоны)

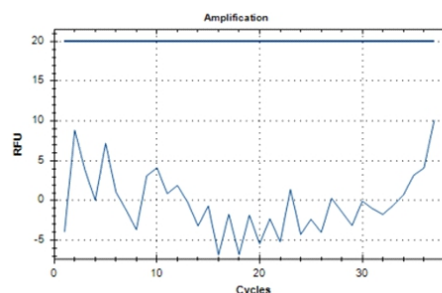

Результаты амплификации образцов после обработки средством для деконтаминации «CleanCheck Remover» (ампликоны)

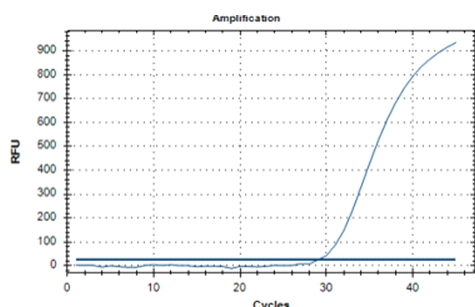

Результаты амплификации до обработки средством для деконтаминации «CleanCheck Remover» (плазмидная ДНК)

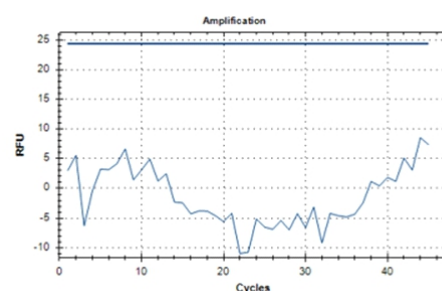

Результаты амплификации после обработки средством для деконтаминации «CleanCheck Remover» (плазмидная ДНК)