

ALGIMED TECHNO

Набор реагентов

«**ALSENSE *Phytoplasma mali/pyri***»

algimed-techno.com



Назначение и область применения

Набор реагентов «ALSENSE *Phytoplasma mali/pyri*» предназначен для обнаружения специфической ДНК *Phytoplasma mali* и *Phytoplasma pyri* методом ПЦР на основе использования технологии TaqMan в препаратах нуклеиновых кислот.

Фитоплазма пролиферации яблони (*Candidatus Phytoplasma mali*) и фитоплазма истощения и отмирания груши (*Candidatus Phytoplasma pyri*) являются возбудителями опасных болезней яблони и груши и наносят серьезный экономический ущерб плодоводству на территории Европы. Фитопатогены относятся к таксономической группе 16SrX и являются карантинными объектами для Республики Беларусь, стран Евразийского экономического союза и стран, входящих в Европейскую и Средиземноморскую организацию по карантину и защите растений (EPPO A2 list). Экономически наиболее значимыми хозяевами для *Candidatus Phytoplasma mali* и *Candidatus Phytoplasma pyri* являются *Pyrus spp.*, *Malus spp.*, *Cydonia spp.*

Принцип метода

«ALSENSE *Phytoplasma mali/pyri*» разработан на основе рекомендаций Европейской и Средиземноморской организации по карантину и защите растений (EPPO) и позволяет детектировать ДНК патогенов методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. Мишенью для амплификации является участок гена 16S рибосомной РНК фитоплазм группы 16SrX. Внутренний контроль (ВКО) разработан на основе последовательностей генов 18S рибосомной РНК яблони и груши.

Зонд TaqMan к участку генома *Candidatus Phytoplasma mali* и *Candidatus Phytoplasma pyri* несет на 5'-конце метку-краситель FAM. ВКО-специфичный зонд мечен флуорофором HEX, что позволяет пользователю валидировать этап экстракции ДНК из растений.



Состав и комплектность набора

Доступны два варианта набора реагентов «ALSENSE» для выявления *Phytoplasma mali/pyri* методом ПЦР-РВ: на 24 реакции и на 96 реакций.

Продукт	Каталожный номер	Компоненты
ALSENSE <i>Phytoplasma mali/pyri</i> , 24 реакции	SPMP-076-24	24 реакции: - 2x PCR mastermix PMPP (1 пробирка). - ПКО PMPP (1 пробирка). - ОКО (1 пробирка).
ALSENSE <i>Phytoplasma mali/pyri</i> , 96 реакций	SPMP-076-96	96 реакций: - 2x PCR mastermix PMPP (4 пробирки). - ПКО PMPP (1 пробирка). - ОКО (1 пробирка).

Аналитические характеристики

- Аналитическая специфичность: 100%
- Аналитическая чувствительность: для испытания аналитической чувствительности набора был произведен ряд из 8-ми десятикратных разведений ДНК *Phytoplasma mali* или *Phytoplasma pyri*, полученной из зараженного растения. Положительная реакция наблюдалась при разведении исходного образца в 10^7 раз.

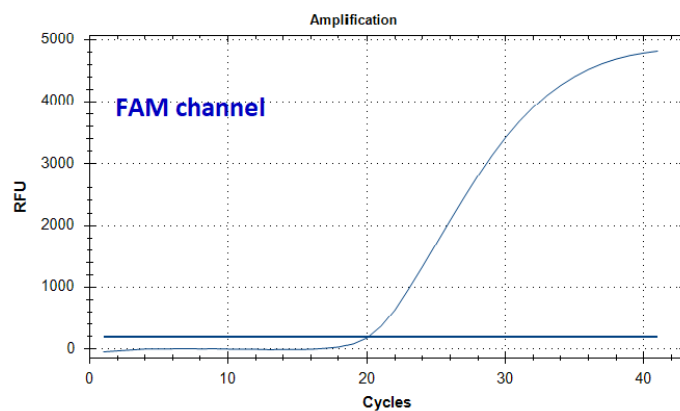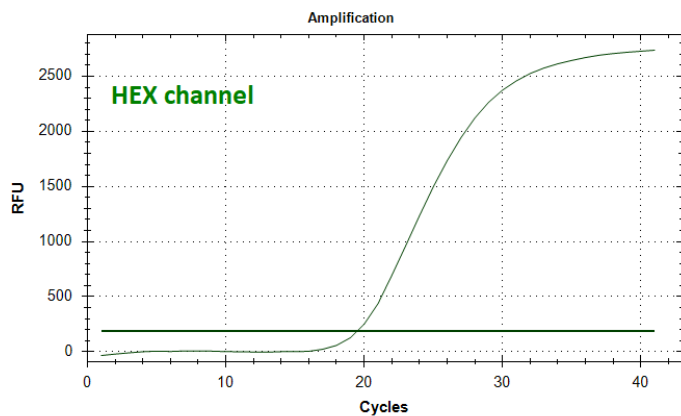

Пример положительного результата ПЦР с использованием набора реагентов «ALSENSE *Phytoplasma mali/pyri*».