



# Испытательная камера для литий-ионных аккумуляторов

Испытательная камера BINDER для проведения старения и эксплуатационных испытаний литий-ионных аккумуляторов предлагает максимальные преимущества использования и соответствует требованиям Eucar/Hazard level 4\* BINDER предлагает испытательные камеры со стандартным пакетом для проведения только испытаний на старение, а также расширенный пакет для проведения функциональных испытаний и испытаний на старение.

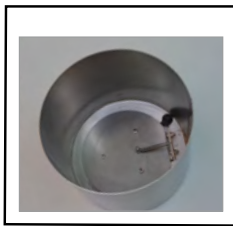

Редукционный клапан с дополнительной разгрузочной пружиной, как мерой на случай неисправности

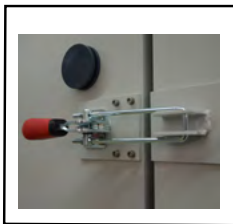

Система безопасности дверей с мощными стяжными зажимами на боковой стороне

Входы для внешних измерительных устройств




**Eucar/  
Hazard-  
Level 4\***

Дополнительные защитные меры наклиматической камере с переменными климатическими условиями МК 240



Ограничение диапазона температуры до 120 °C на контроллере

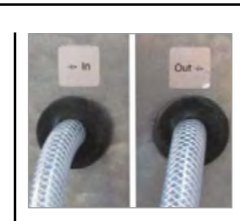

Подключения для инертного газа (например, азота) для промывки

## ПАКЕТ Р — ДЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ И ИСПЫТАНИЙ НА СТАРЕНИЕ

### Применение:

Элементы и модули испытываются при различных температурах **с током или без тока** для определения производительности.

### Решение:

- Независимый ограничитель температуры класса 2 при установленной температуре 120 °C
- Ограничение диапазона температуры до 120 °C на контроллере
- Редукционный клапан из нержавеющей стали, установленный на устройстве сверху по центру
- Расширенная система безопасности дверей с усиленными стяжными зажимами
- Подключения для инертного газа

### КАК СВЯЗАТЬСЯ С BINDER:

Телефон: +49 (0) 7462/2005-0  
Эл. почта: [info@binder-world.com](mailto:info@binder-world.com)  
[www.binder-world.com](http://www.binder-world.com)



## ПАКЕТ А — ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ НА СТАРЕНИЕ

### Применение:

Элементы и модули проводятся исключительно для испытаний **без тока** при различных температурах с целью проверки старения при хранении.

### Решение:

- Независимый ограничитель температуры класса 2 при установленной температуре 120 °С.
- Ограничение диапазона температуры до 120 °С на контроллере

## ДРУГИЕ ДОРАБОТКИ ПО ЖЕЛАНИЮ:


Наш отдел BINDER INDIVIDUAL занимается переоборудованием и оснащением серийных устройств BINDER дополнительными функциями по специальным пожеланиям клиентов.



Индикация хода выполнения программы при помощи сигнальной лампы



Электромеханическая блокировка двери, управляемая программой и/или вручную

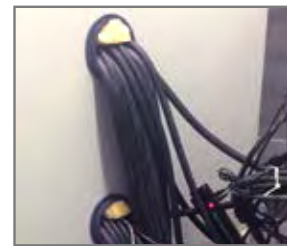

Возможность оснащения дополнительными входами практически любых размеров и в любых местах

## СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ



Узнайте больше из нашего отчета пользователя:

TÜV SÜD Battery Testing GmbH — Аккумулятор проходит испытание на выносливость

› [go2binder.com/ru-TUEV-SUED-Battery-Testing](https://go2binder.com/ru-TUEV-SUED-Battery-Testing)

### Подробнее ›

Более подробная информация и приложение о камерах для проведения испытаний с элементами и модулями  
› [go2binder.com/ru-BINDER-INDIVIDUAL](https://go2binder.com/ru-BINDER-INDIVIDUAL)

\*финальные меры безопасности принимает эксплуатирующая сторона